



ES



Venus Plus LED MCT View

Iluminación perfecta, comunicación eficaz

La lámpara Venus Plus LED MCT View está provista de una cámara 4 K integrada en la estructura. El sensor de la cámara está dotado de tecnología de lentes líquidas, ideal para el ambiente odontológico, que garantiza un enfoque rápido y perfecto en cualquier situación operativa.

El estabilizador digital garantiza excelentes resultados incluso para las aplicaciones integradas en el equipo. Con Venus LED MCT, cada tratamiento dispone de una iluminación calibrada en función de las necesidades clínicas reales: luz cálida 4300 K para la cirugía, neutra 5000 K para la odontología conservadora y fría 5500 K para la selección cromática.



4K
ULTRA HD



Vídeo 4 K

Venus LED MCT View graba vídeos con una resolución de hasta 4 K y adquiere imágenes con una resolución de 13 MP. El software PC permite gestionar todos los parámetros de la cámara y los controles, como el inicio de la grabación, la captura de imágenes, zoom y Smart Focus.

Smart Focus

Gracias a la tecnología de lentes líquidas, es posible regular el enfoque de la cámara digitalmente en pocos instantes. El enfoque se activa directamente desde el PC mediante un pulsador de la consola Full Touch o tocando el área sensible presente en la cámara. El enfoque no está sujeto a las posibles interferencias causadas por el spray o por los elementos del área operatoria.

Temperatura multicolor

Venus LED MCT View ofrece una iluminación con tres temperaturas de color diferentes, adecuadas para las distintas fases operativas: 4300 K para la cirugía de precisión, 5000 K para las restauraciones conservadoras y 5500 K para una percepción cromática de alta precisión. También está disponible el modo Composite, que reduce la longitud de onda a un valor comprendido entre 430 y 480 nm optimizando el tiempo de modelado de los materiales, sin interferir con la polimerización.

Sensor no touch

Práctico sensor no touch que, además de encender y apagar la lámpara, ajusta la intensidad luminosa hasta 50 000 lux.

Tecnología fiable para una gestión segura y completa


Integración y versatilidad

Conectada directamente al PC del consultorio, la lámpara MCT View se gestiona fácilmente mediante el software Venus View permitiendo regular las configuraciones, grabar y archivar con simplicidad. Disponible en versión integrada en el equipo, de techo o de pared para adaptarse a cualquier configuración del consultorio.



Comunicación clara y apoyo documental

La cámara 4 K integrada permite ilustrar con precisión el estado de salud oral del paciente, mejorando la transparencia en la comunicación y favoreciendo la aceptación de los tratamientos. También representa un instrumento útil para la didáctica, dado que facilita la compartición clara e inmediata de los casos clínicos.

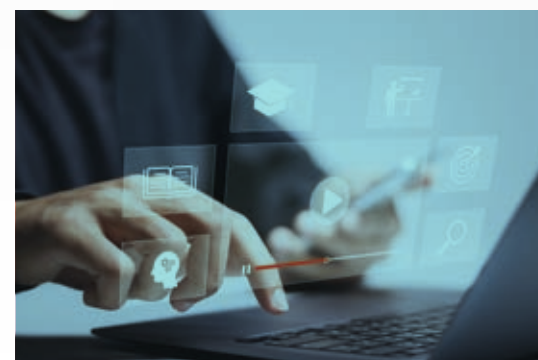

Grabación segura y archivo fiable

El sistema permite documentar cada fase del tratamiento, grabando con precisión los casos clínicos. Los archivos guardados son una garantía tanto para la gestión de los historiales clínicos como para posibles necesidades legales o en materia de seguros.

Tecnología segura, fiable y fácil de usar



Full Touch: practicidad y control inmediato

La integración con la consola Full Touch simplifica la gestión de la lámpara: la activación de la grabación, la adquisición de imágenes y el zoom están al alcance de la mano sin necesidad de acceder al PC, reduciendo el riesgo de contaminación cruzada.



Comandos de voz: un apoyo higiénico y eficaz

Gracias a los comandos de voz, es posible gestionar la cámara sin ningún contacto físico, mejorando la higiene y el confort operativo.



Control con pedal: higiene y seguridad

Activable en modo avanzado, el joystick del pedal permite interactuar con la cámara sin utilizar las manos, mejorando su eficiencia e higiene.



Estabilizador digital: imágenes estables para una visión clara

El sistema de estabilización digital de Venus MCT View elimina las oscilaciones causadas por movimientos involuntarios, garantizando una calidad visual constante durante todos los procedimientos.



**BU Medical Equipment
Sede Legale ed
Amministrativa
Headquarters**

CEFLA s.c.
Via Selice Provinciale, 23/a
40026 Imola (BO) - Italy
Tel. +39 0542 653111
Fax +39 0542 653344

Stabilimento / Plant

Via Bicocca, 14/C
40026 Imola (BO) - Italy
Tel. +39 0542 653441
Fax +39 0542 653601
www.mocom.it



03/2025

MMCTSP251S00

Debido a la constante actualización tecnológica de nuestros productos, las características técnicas indicadas pueden ser objeto de modificación sin previo aviso.
Según las normativas vigentes, en las áreas fuera de la UE algunos productos o características pueden presentar disponibilidades y peculiaridades distintas. Te invitamos a contactar con el distribuidor local.

